



摆头式举宫器各部件组合在一起，  
顺利置入手术部位

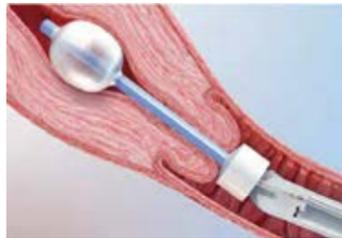

宫腔球囊注入生理盐水膨胀后能够牢固贴合子宫壁并轻松支撑

宫杯的设计更容易插入

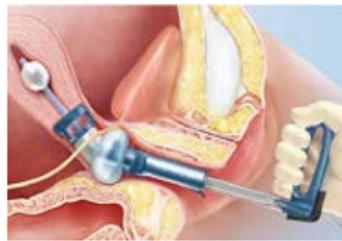

宫杯高效提供理想的视觉解剖标识

**安柏瑞（常州）医疗科技有限公司**

电话：0519-88162288 180 5273 7618  
邮箱：114123575@qq.com  
地址：常州市武进区礼嘉镇政平政兴路15号

## 规格型号配置

表1 子宫操纵器组件基本尺寸表

规格型号	操纵器工作长度 (mm)
JC	223.5

表2 阴道穹窿固定器基本尺寸表

规格型号	宫杯内径 (mm)	宫杯组件有效长度 (mm)	阴道封堵球囊充盈范围 (mL)
B25	25	168	60-120
B30	30	168	60-120
B35	35	168	60-120
B40	40	168	60-120

表3 子宫定位系统基本尺寸表

规格型号	三腔管有效长度 (mm)	三腔管外径尺寸 (mm)	宫腔球囊标称体积 (mL)
D37	37.5	6.7	10
D60	60	6.7	10
D80	80	6.7	10
D10	100	6.7	10
D12	120	6.7	10

表4 举宫器规格型号配置表

举宫器规格型号	子宫操纵器型号	阴道穹窿固定器型号	子宫定位系统型号
I型 JC/B25/D37	JC	B25	D37
II型 JC/B25/D37	JC	B25	D37
I型 JC/B25/D60	JC	B25	D60
II型 JC/B25/D60	JC	B25	D60
I型 JC/B25/D80	JC	B25	D80
II型 JC/B25/D80	JC	B25	D80
I型 JC/B25/D10	JC	B25	D10
II型 JC/B25/D10	JC	B25	D10
I型 JC/B25/D12	JC	B25	D12
II型 JC/B25/D12	JC	B25	D12
I型 JC/B30/D37	JC	B30	D37
II型 JC/B30/D37	JC	B30	D37
I型 JC/B30/D60	JC	B30	D60
II型 JC/B30/D60	JC	B30	D60
I型 JC/B30/D80	JC	B30	D80
II型 JC/B30/D80	JC	B30	D80
I型 JC/B30/D10	JC	B30	D10
II型 JC/B30/D10	JC	B30	D10
I型 JC/B30/D12	JC	B30	D12
II型 JC/B30/D12	JC	B30	D12
I型 JC/B35/D37	JC	B35	D37
II型 JC/B35/D37	JC	B35	D37
I型 JC/B35/D60	JC	B35	D60
II型 JC/B35/D60	JC	B35	D60
I型 JC/B35/D80	JC	B35	D80
II型 JC/B35/D80	JC	B35	D80
I型 JC/B35/D10	JC	B35	D10
II型 JC/B35/D10	JC	B35	D10
I型 JC/B35/D12	JC	B35	D12
II型 JC/B35/D12	JC	B35	D12
I型 JC/B40/D37	JC	B40	D37
II型 JC/B40/D37	JC	B40	D37
I型 JC/B40/D60	JC	B40	D60
II型 JC/B40/D60	JC	B40	D60
I型 JC/B40/D80	JC	B40	D80
II型 JC/B40/D80	JC	B40	D80
I型 JC/B40/D10	JC	B40	D10
II型 JC/B40/D10	JC	B40	D10
I型 JC/B40/D12	JC	B40	D12
II型 JC/B40/D12	JC	B40	D12

※ 备注：II型为套件

**ANBARI 安柏瑞**


## 一次性使用摆头式举宫器

Disposable swing-head uterus manipulator

【苏械注准 20252182011】

摆头式举宫器，  
腹腔镜下妇科手术的理想选择

拥有卓越的操控系统，术野暴露更佳，  
满足您的临床需求

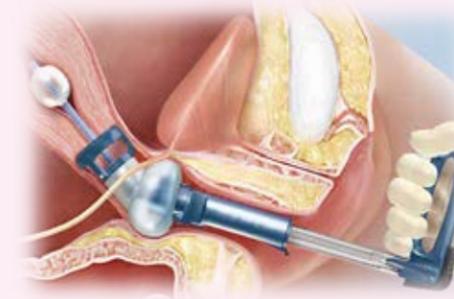

**安柏瑞（常州）医疗科技有限公司**

Anbari(Changzhou) Medical Technology Co.,Ltd

## 使用安柏瑞摆头式举宫器， 全子宫切除术更容易，快捷，安全

### 适用范围及结构组成：


用于宫腔镜或宫 / 腹腔镜联合下手术时，摆动、提升子宫，调整子宫方位或定位。  
一次性使用摆头式举宫器由子宫操纵器、阴道穹窿固定器、子宫定位系统组成。

### 子宫操纵器：维持举宫效果，充分的术野暴露， 帮助手术入路

子宫操纵器配备锁定手柄，可以控制子宫定位系统 140°（90° 前倾和 50° 后倾）旋转，充分暴露解剖结构，切口远离输尿管，保护输卵管和子宫动脉，使手术更加便捷、安全。


### 操作灵活，满足临床需求

摆头式举宫器操作灵活，创伤小，是妇科手术的首先。包括诊断性腹腔镜检查，子宫肌瘤剔除术，子宫内膜异位症切除术，附件切除及输卵管通液检查等。

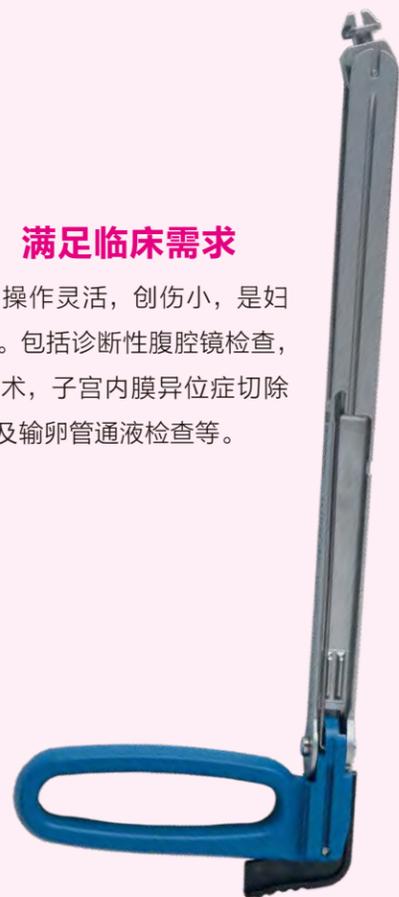

### 阴道穹窿固定器：帮助避开重要的解剖结构， 建立安全边际，为全子宫切除术提供安全保障

阴道穹窿固定器集杯体及球囊为一体，与手柄结合在一起使用，置入容易，有4种尺寸适合不同体型患者，放置在阴道穹窿处能灵活控制子宫颈运动，可以作为解剖标志，帮助避开重要解剖结构、建立“安全边际”，为腹腔镜下全子宫切除术提供安全保障。且锁定手柄可保持子宫定位系统在固定位置，保证举宫效果。

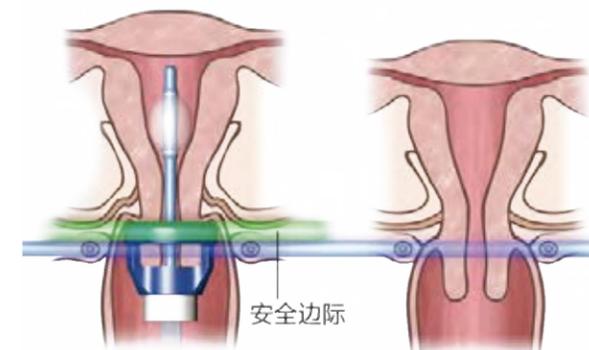

### 子宫定位系统：硅胶软性头端， 合适的尺寸避免创伤

有6种规格，适用于不同体型的患者，采用柔软的硅胶材质，远端头端柔软灵活，降低子宫穿孔和创伤风险。宫腔球囊注入生理盐水，头端完美契合内壁，牢固支撑。配合关节式操纵器使用。



软性硅胶头端及球囊可以减少对子宫壁的损伤

### 安装简便，提高效率，更加安全

阴道穹窿固定器，轻轻向前一推，阴道穹窿固定器即可贴合到位。子宫定位系统，注入生理盐水后膨胀的子宫定位系统提供了稳固的支撑，阴道穹窿固定器更容易插入，并且提供了理想的视觉解剖标识。

